

Nové ENTity za Váš starý nasopharyngoskop

Nasofaryngo-laryngoskop s integrovaným zdrojem světla

2,7mm / 3,6mm

.... A již žádné kabely

ENTity XL/SDXL

zcela přenosný flexibilní endoskop
s patentovanou unikátní
technologií světla OPTILUX.
Skvělý pomocník při provádění
nosní endoskopie a laryngoskopie.




Výhody flexibilního endoskopu ENTity XL LED

- Velká flexibilita a široké rozpětí ohybu (135° nahoru/135° dolů) pro komfort lékaře i pacienta
- Průměr tubusu 2,7mm/3,6mm
- Vysoce kvalitní optika, přesné a barevně konzistentní zobrazování s 30/45-ti násobným zvětšením
- Hloubka ostření 5-50mm, úhel pohledu 70°
- Integrovaný modul osvětlení pomocí LED diod s regulací intenzity – patentovaná technologie OPTILUX

Máte-li zájem, napište: mewadia@mewadia.cz
nebo volejte: 543 247 834 / 728 720 051 / 737 329 835

		
Vyjimečná optika – vynikající kvalita obrazu zaručuje jasný, ostrý obraz s nastavitelným ohniskem	Přesné ovládání – veškeré ovládací komponenty jsou zabudované do lehké hliníkové rukojeti – intenzita světla i ohyb distálního konce lze pohodlně ovládat jednou rukou.	2 dostupné průměry – průměry tuby 2,7 a 3,6mm jsou komfortní pro lékaře i pacienta
		
Bezkonkurenční světelný výkon – patentovaný systém Optilux™ zajišťuje velmi intenzivní světlo bez ztrát i z konce endoskopu	Zabudovaný světelný zdroj – LED světlo je zabudované přímo do těla endoskopu, proto není potřeba žádný kabel ani rukojeť. K endoskopu obdržíte 2 akumulátory a nabíječku.	24 – měsíční záruka na fibroskop

Optilux™
Unikátní LED systém světla bez ztrát spolu s velkým zvětšením obrazu dělá flexibilní endoskop ENTity XL opravdu výjimečným.

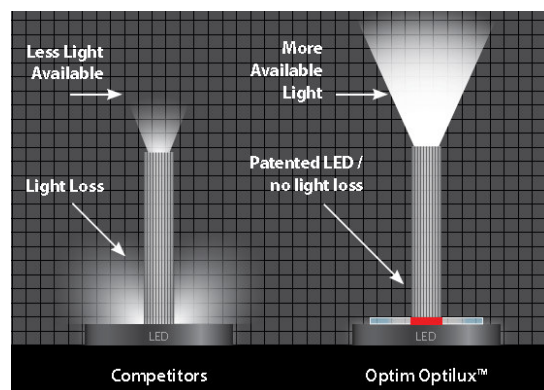

	Výhodou flexibilního endoskopu ENTity SDXL je úzký průměr 2,7mm, který umožňuje pohodlné vyšetření především dětských pacientů		Díky průměru 3,6mm endoskopu ENTity XL je vyšetření nosu a hrtanu snadnější a více přehledné
Specifikace ENTity SDXL – 2,7mm		Specifikace ENTity XL – 3,6mm	
Délka tuby endoskopu	30cm	Délka tuby endoskopu	30cm
Kompletní délka endoskopu	53cm	Kompletní délka endoskopu	53cm
Průměr tuby endoskopu	2,7mm	Průměr tuby endoskopu	3,6mm
Váha endoskopu	0,33 kg	Váha endoskopu	0,33 kg
Ohyb distálního konce	110° nahoru / dolů	Ohyb distálního konce	135° nahoru / dolů
Hloubka ostření	5 – 50mm	Hloubka ostření	5 – 50mm
Pole výhledu	85°	Pole výhledu	70°
Baterie	Li-ion	Baterie	Li-ion
Zvětšení	45x nebo 30x	Zvětšení	30x

Hlinky 64, 603 00 Brno • Tel./Fax: +420 543 247 834

E-mail: mewadia@mewadia.cz

http:// www.mewadia.cz