

ORL vyšetřovací jednotka OPTIMUS

Optimalizujte si Vaši ordinaci

- Plně autonomní a mobilní jednotka
- Integrovaná endoskopická věž a mikroskop (volitelně)
- Prostorné pracovní plochy i zásuvky



Plné vybavení na malém prostoru

Ruku v ruce s ORL vyšetřovací jednotkou jde design a řešení pracovního prostoru

Vyšetřovací jednotka OPTIMUS zabírá opravdu malý prostor - 0,5 m² podlahové plochy a přitom nabízí mnohem více - 3m² užitkové plochy, vše včetně pracovních ploch, zásuvek a odkládacích prostor.

Ve spojení s OPTOMIC ORL křeslem je výsledkem perfektní funkční kombinace efektivity a ergonomie v ORL vyšetření.

Veškeré vybavení v podobě endoskopické věže lze plně funkčně integrovat do prostor vyšetřovací jednotky.


Kompletní ORL jednotku, která splní i ty nejnáročnější požadavky dnešní moderní ORL ordinace, získáte spojením unitu s vyšetřovacím mikroskopem OP-C12.

Vyšetřovací jednotka OPTIMUS vylučuje potřebu dalších zásuvkových skříní na nástroje, pracovních ploch i dalších stojanů např. pro mikroskop, odsávací jednotku apod. To vše vám dnes nabídne ORL jednotka OPTIMUS na malém prostoru.





ORL vyšetřovací jednotka OPTIMUS

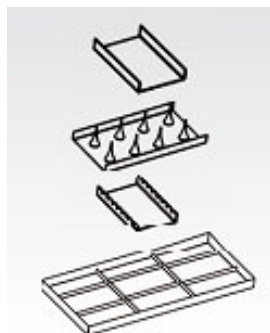

Oddělovač

Držák spekulí

Držák nástrojů

Rozdělovač



ZÁSUVKY

4 prostorné zásuvky a výsuvná pracovní plocha volitelně s odkládacím prostorem pro použité nástroje a germicidním světlem udržujícím antibakteriální prostředí. Díky vysoce odolným jezdcům lze všechny zásuvky lehce vysunout. Všechny zásuvky jsou osazeny automatickým dojezdem zavírání.



VRCHNÍ ZÁSUVKA

Hloubka 4,5cm

Přístupná zvednutím vrchní sklolaminátové desky nebo vysunutím zásuvky

DRUHÁ A TŘETÍ ZÁSUVKA

Hloubka 5,5cm

Pro nástroje a příslušenství



PROSTORNÉ ZÁSUVKY

2 zásuvky hluboké 12,5cm

Zásuvky určené pro větší a těžší věci. Jsou umístěné na spodu unitu a jsou obě uzamykatelné.

ODKLÁDACÍ PRACOVNÍ PLOCHA

výsuvná pracovní plocha volitelně s odkládacím prostorem pro použité nástroje a germicidním světlem udržujícím antibakteriální prostředí.



Držák pro kameru a světlovodný kabel a držák čelního světla



ORL vyšetřovací jednotka OPTIMUS

VŽDY ČISTÉ, UKLIZENÉ A BEZPEČNĚ UMÍSTĚNÉ RIGIDNÍ I FLEXIBILNÍ ENDOSKOPY



FLEXIBILNÍ FIBROSKOPY
Vnitřní tuba z akrylového skla

DRŽÁK PRO 4 RIGIDNÍ ENDOSKOPY
4x vnitřní tuba, volitelně i pro dezinfekci

DRŽÁK PRO DEZINFEKCI
Uzavřená tuba z akrylového skla

VYSOCE VÝKONNÝ ODSÁVACÍ SYSTÉM

Zabudovaný bezhlučný a nevíbrující odsávací systém umožňuje současné používání kompletního příslušenství celé vyšetřovací jednotky.



Automatické zapnutí/vypnutí odsávání při vyjmutí/vložení sací koncovky z/do držáku.



Německá odsávací jednotka s vysokým a regulovatelným průtokem max.67l/min. Bakteriologický filtr. Silikonové hadičky.



SKLENĚNÁ ODSÁVACÍ NÁDOBA
Lehce přístupná autoklárovatelná odsávací nádoba 1,5l s plnicím ventilem

ORL vyšetřovací jednotka OPTIMUS

POHODLNÉ A UŽITEČNÉ PRACOVNÍ PLOCHY



Výklopné pracovní plochy na obou stranách unitu pro odložení laptopu nebo poznámkového bloku atd. Mechanismus je vyroben z vysoce odolného plechu, vnější povrch z vrstveného skla



Zadní dveře

umožní připojení všech kabelů a elektrických šňůr od přístrojů používaných s unitem – zdroje světla apod. Vše lze zapnout a vypnout jedním tlačítkem



Spodní police

4 police z vrstveného skla pro uložení videokamery, zdroje světla, stroboskopu, elektrochirurgického přístroje apod.

Police jsou výškově stavitelné.



Barevné vrstvené sklo se vyrábí sendvičovým způsobem a lepením dvou 3mm skleněných tabulí. Sklo je velmi odolné a je k dispozici ve vyobrazené škále barev, což vám umožní vkusně sladit unit s vaší ordinací.

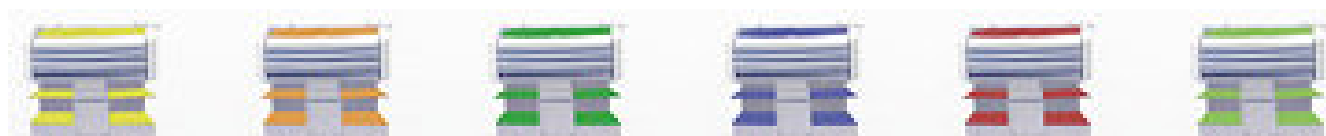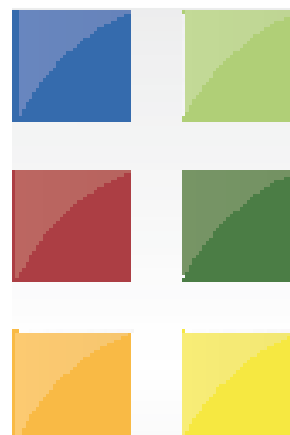

ORL vyšetřovací jednotka OPTIMUS

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Odsávací systém s automatickým startem	67l/minutu
Regulace tlaku – tlakoměr	Postupná regulace
Tlačítka ovládaný odpadkový koš	17x23x26cm/9l
6 zásuvek pro instrumenty a příslušenství	1x 34cm x79cm, hloubka 4,5cm 2x 40cm x79cm, hloubka 5,5cm 1x 40cm x 79cm, hloubka 8cm 2x 28cm x 39cm, hloubka 12,5cm
9 pracovních ploch	1x vysunovací přihrádka 40cm x 79cm 2x výklopná pracovní plocha 36cm x 33cm 2x sklopná skleněná plocha 37cm x 40cm 4x skleněná police 34 x 40cm
Endoskopické držáky a dezinfekční toulce	Pro 4 rigidní a 2 flexibilní endoskopy
Výběr barev	6 možných barevných kombinací
Volitelné příslušenství	Endoskopická kamera Držák pro mikroskop Kloubové/přímé rameno pro monitor Držák na endoskopickou kameru Držák čelního světla